

## 주의

- 자세한 설정 및 작동 정보에 대해서는 치료 장치의 설명서를 참조하십시오.
- 임상 의사가 치료 장치와의 호환성 여부를 확인할 수 있도록 마스크의 기술 사양이 제시되어 있습니다. 규격 외 사용시 마스크의 밀착성과 안락성이 효과적이지 않거나, 최적의 치료를 달성하지 못하거나, 누출 또는 누출율의 변화가 장치 기능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 먼지와 피부의 유분 오염물이 마스크에 쌓이는 것을 방지하기 위해 이들에 한 번씩 마스크를 세척해야 합니다.
- 승인되지 않은 세척 방법이나 소독 방법으로 마스크를 세척해서는 안 됩니다.
- 사용자는 마스크를 착용하기 전에 얼굴을 씻어야 합니다.
- 환자는 마스크의 디자인을 변경해서는 안 됩니다.
- 마스크를 의류 건조기에 넣지 마십시오.

## 사용 금지 사유

- 없음

## 기술 사양

1. 치료압 범위: 4~20cmH<sub>2</sub>O
2. 22mm의 회전 고리로 연결
3. 저항(압력 강하)
  - @ 50 lpm = 0.4 cmH<sub>2</sub>O
  - @ 100 lpm = 0.7 cmH<sub>2</sub>O
4. 고정 누출율(제조상의 변화에 따라 유량은 달라질 수 있음):

압력 (cmH <sub>2</sub> O)	4	5	10	15	20
유량 (lpm)	14	16	27	37	45

5. 환경적인 보관 및 작동 조건은 이 장치의 기능에 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다.
6. 음향 레벨
  - A가중치의 음력 레벨, 27 dBA
  - A가중치의 음압 레벨 @ 1m, 19 dBA
7. 이 장치는 최소 90일 이상의 기간 동안 정상적인 사용 및 세척 조건 하에서 사용하기에 적합할 것으로 예상됩니다.
8. 이 장치는 천연 고무 라텍스로 만들어지지 않았습니다.

제한 보증 [www.circadiance.com/help](http://www.circadiance.com/help)



EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20,  
2514 AP The Hague,  
The Netherlands



**SleepWeaver**  
Soft Cloth Masks

Élan<sup>®</sup>

사용 지침


한국어

## 용도


이 SleepWeaver Mask는 지속기도양압(CPAP) 또는 2단계 치료에 필요한 경계면을 제공하기 위해 만들어졌습니다. 이 마스크는 한 명의 환자가 가정에서 재사용하거나 다수의 환자가 가정/시설 환경에서 여러 번 사용할 수 있도록 만들어졌습니다. 이 마스크는 체중이 30kg 이상인 환자에게 사용됩니다.



## 마스크 방향

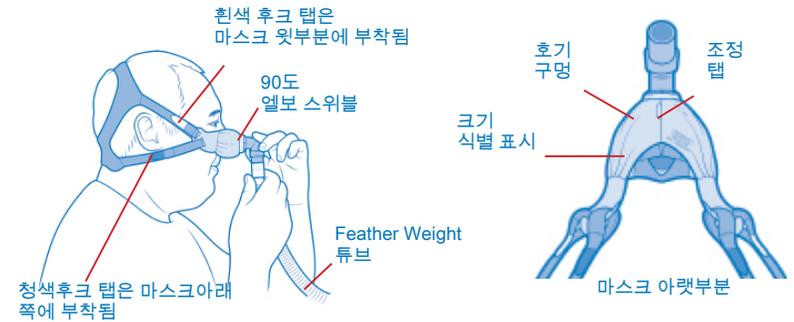

## 마스크 착용

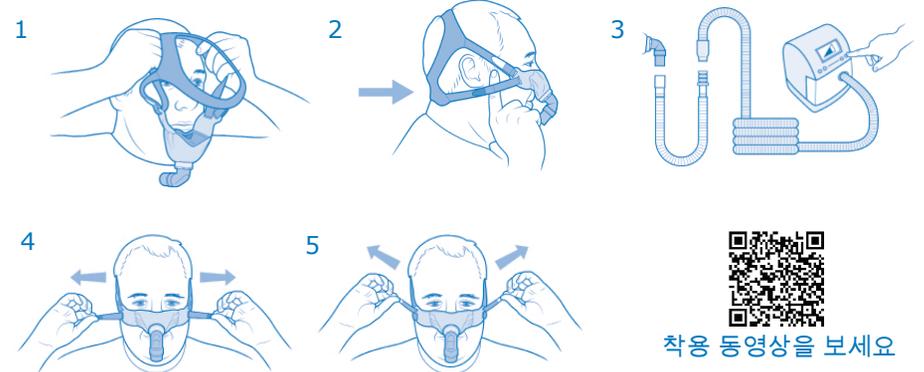

착용 동영상을 보세요

[www.circadiance.com/help](http://www.circadiance.com/help)




실제 주소: 1010 Corporate Lane Export, PA 15632  
전화: 888-825-9640 or +1 724-858-2837  
info@circadiance.com [www.circadiance.com](http://www.circadiance.com)

## 마스크 착용하기(계속)

1. 머리 위로 헤드기어를 잡아당겨 얼굴에 착용하십시오.
2. 헤드기어의 목지대가 목 아랫부분에 편안하게 맞아야 합니다. 중요 - 끈을 너무 꽉 조이지 마십시오. 처음에는 끈을 느슨하게 조이다가 원하는 밀폐 정도에 도달할 때까지 필요한 만큼 꼭 끼게 조이십시오.
3. 아래쪽(청색 후크 탭) 끈을 조절하여 마스크가 코에 편하게 위치하도록 하십시오. 마스크 사용 시 검은색 천이 조금 노출될 것입니다.
4. 마스크 일부가 콧구멍 바로 아래 윗입술에 편하게 맞도록 위쪽(흰색 후크 탭) 끈부터 먼저 조절하십시오.
5. Feather Weight 튜브를 90도 엘보 스위블에 연결한 후 다시 CPAP 또는 이중 양압 기계에 부착된 6피트(약 1.8m) 튜브에 연결한 후 기계를 작동하십시오.
6. 평소의 수면 자세로 누우며, 원단 부분이 피부에 밀착할 수 있도록 필요 시 마스크 위치를 옮깁니다. 추가적인 조정 팁이 다음 섹션에 있으며, 자세한 착용 동영상은 [www.circadiance.com/help](http://www.circadiance.com/help)에서 볼 수 있습니다.

## 누출 방지 조정 - 누출 문제가 발생하면 다음과 같이 조치하십시오

1. 원하는 밀폐 정도에 도달할 때까지 끈을 아주 조금씩 살짝 조이십시오.
2. 상하좌우로 위치를 바꿔가며 마스크를 움직여 얼굴에 잘 맞추십시오. 이때 마스크 아래 쪽에 있는 조정 탭을 사용할 수 있습니다.

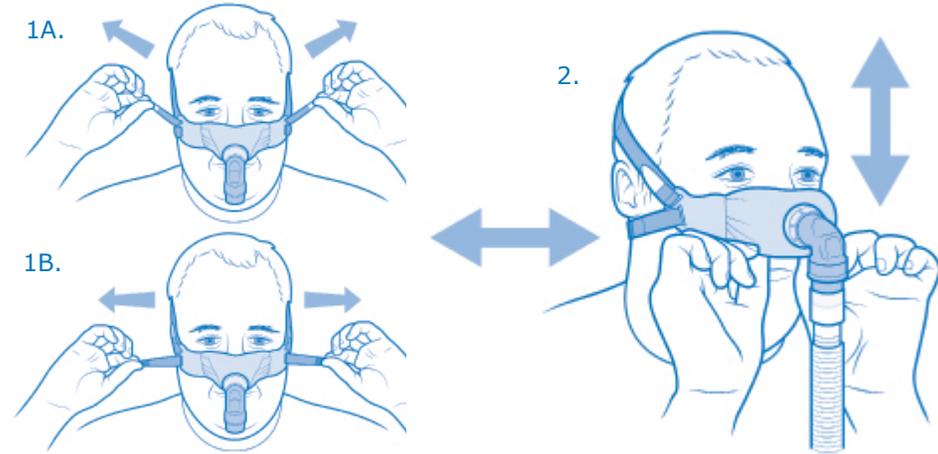

## 가정에서 마스크 세척

- SleepWeaver Elan은 이틀에 한 번씩 순한 비연마성 비누로 따뜻한 물에 손세척으로 씻어야 합니다. 뜨거운 물을 사용하지 마십시오. 눈으로 봐서 깨끗해질 때까지 세척을 반복하십시오.
- 식수 수준의 깨끗한 물로 잘 헹군 후 직사광선을 피해 바람이 잘 통하는 그늘에서 말리십시오.
- 세척 시 90도 엘보 스위블을 떼어낼 필요 없이 그대로 놔두거나 떼어낸 후 분리하여 세척해도 됩니다.
- 헤드기어는 매주 손세척하십시오.

## 여러 명의 환자 이용 시 세척 및 소독

- [www.circadiance.com/help](http://www.circadiance.com/help) 사이트를 참조하십시오.

## 헤드기어에 마스크 부착

1. „흰색“ 후크 탭을 쿠션의 위쪽 홈에 살짝 밀어 넣으십시오.
2. „청색“ 후크 탭을 쿠션의 아래쪽 홈에 살짝 밀어 넣으십시오.

## 마스크 쿠션에 90도 엘보 스위블 부착

1. “스레드”를 마스크 안쪽에서부터 빈 구멍에 끼워 넣으십시오.
2. “스레드” 위에 “와셔”를 올리십시오.
3. 마스크 천이 스레드에 걸리지 않도록 하십시오.
4. “너트”를 스레드 “에 끼워 맞춘 후 돌려 조이십시오.



## 헤드기어에 고정 끈 부착

1. Feather Weight 튜브에 “고정 끈”을 연결한 후 헤드기어 위쪽에 연결하여 튜브가 머리 쪽으로 쏠리지 않게 고정합니다.
2. “고정 끈”을 연결할 때 끈이 꼬이지 않도록 주의하십시오.



## ⚠ 경고

- 이 장치는 통기 마스크이므로, 듀얼 림 인공호흡기 회로와 함께 사용해서는 안 됩니다.
- 이 마스크 또는 헤드기어의 어떤 부분에 대해 반작용이 있을 경우, 즉시 사용을 중단하십시오.
- 이 치료 장치는 전원을 켜서 올바르게 작동하는 경우가 아니면 사용해서는 안 됩니다.
- 통기구는 절대 막혀 있어서는 안 됩니다.
- 마스크를 올바르게 착용했는지 확인하십시오. 이 지침의 앞 페이지에 나온 대로 마스크와 헤드기어를 조립하고 위치시켰는지 확인하십시오.
- 시스템 구성품의 품질 저하가 눈에 확실하게 보일 경우(갈라짐, 부서진 부분, 찢어짐 등), 또는 세척 후에도 구성품이 더러운 경우 구성품을 폐기하고 교체해야 합니다.
- 이 지침에 설명된 것과 다르게 빈도, 방법, 또는 세척제를 바꾸어서 이 제품을 세척하면 마스크는 물론 결과적으로 치료의 안전성이나 품질에도 악영향을 미칠 수 있습니다.
- 마스크를 보충용 산소와 함께 사용할 경우 기계가 작동하지 않으면 산소 흐름을 꺼야 합니다. 산소가 누적되면 화재 위험이 있기 때문입니다.
- 마스크를 보충용 산소와 함께 사용할 경우 환자는 흡연을 삼가야 합니다.